



ELS Detector C-650


Tous les composés visibles en même temps

Le détecteur évaporatif à diffusion de lumière (ELSD) détecte tous les composés non volatils, y compris ceux non visibles par les autres détecteurs. Le ELS Detector C-650 traite ainsi toutes les combinaisons de phases mobiles et de gradients nécessaires pour atteindre des séparations rapides et efficaces.



Universalité

Détection de tous les composés,
quels que soient les solvants d'éluion

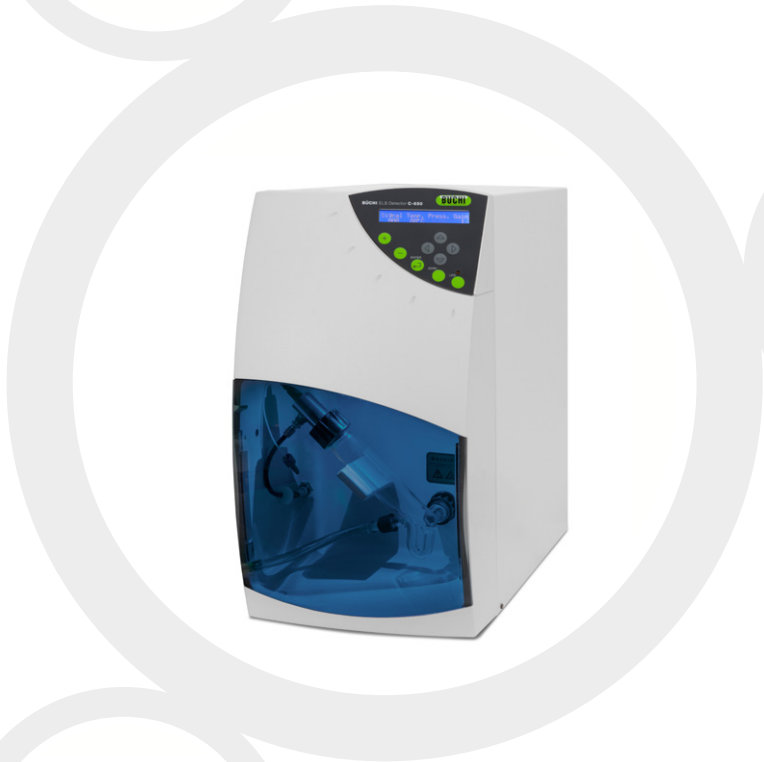


Convivialité

Peu de paramètres
à régler



Flexibilité

Adapté à la chromatographie flash et à la
chromatographie liquide à haute perfor-
mance préparative (HPLC Prep)

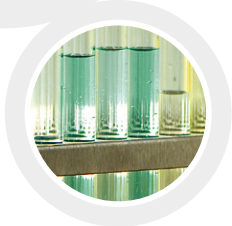

C-650: Aperçu des avantages les plus importants



Universalité

- Détection de tous les composés, quelles que soient les propriétés spectroscopiques
- Aucune influence des gradients d'élution
- Détection des analytes semi-volatils grâce à l'évaporation basse température
- Flexibilité accrue dans le choix des solvants d'élution



Convivialité

- Ensemble standard de paramètres adaptés à la plupart des applications
- Durée de préchauffage minimale
- Utilisation de tout solvant, même volatil
- Évaluation quantitative aisée par détection massique sensible



Flexibilité

- Plage de débits élevés (jusqu'à 250 mL/min.) à l'aide d'un diviseur de flux optimisé
- Applications préparatives avec un nébuliseur particulier
- Perte minimale d'échantillon au cours du processus de détection

Complétez votre gamme de produits



Pump Module
C-601 / C-605
Pompe



FlashPure
Cartridges
Tirez le maximum de
vos purifications flash



Fraction collector
C-660
Récupération des
fractions



SepacoreControl
Software
Logiciel de contrôle
complet

