



## ロータリーエバポレーター R-100 / 真空ポンプ V-100 エッセンシャルシリーズ キャンペーン

**大好評につき期間延長 !!**

**2018年6月末まで**

ビューヒのエバポレーター R-100 (標準価格 ¥320,000) が

キャンペーン価格  
**38% OFF**

**¥199,000**

**翌営業日  
出荷可能!**

※大好評につき在庫切れ  
の場合は1ヶ月程度か  
かる場合もあります。



- 壊れにくい
- 高気密
- 簡単操作
- 高速回転

品名	品番	標準価格	キャンペーン価格
ロータリーエバポレーター R-100			
標準ガラス	11100V102	¥ 320,000	▶ <b>¥199,000</b>
プラスチックコーティングガラス	11100V112	¥ 340,000	▶ <b>¥209,000</b>

### 蒸留 / 濃縮時間の短縮の決め手は回転数アップ


水 (100mL) を 60°C のバスで蒸留すると、回転数により蒸留時間に以下のような差が生じます。

**280rpm** → 10分50秒

160rpm → 19分12秒

80rpm → 24分33秒

※当社テスト機での実測値  
(設定真空度: 72hPa)

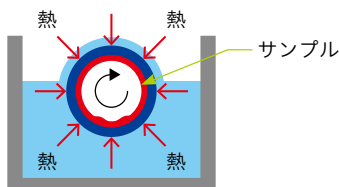

回転中の試料フラスコの断面図

裏面にはお得な  
真空ポンプキャンペーン

# 洗えるポンプキャンペーン

簡単洗浄！簡単メンテナンスの洗える！ポンプがこの価格！

2018年6月末まで！

超 特 価

¥149,000~

## ラボでのさまざまな真空引き用途に



### ダイヤモンド真空ポンプ V-100

品番 11V100000

標準価格 ¥200,000 ▶

キャンペーン価格 **¥149,000**

- 排気量1.5m<sup>3</sup>/h
- 到達真空度10hPa
- 低振動でとても静か
- 堅牢で壊れにくい
- 高い耐溶媒性溶媒がポンプ内部に混入しても問題なし
- 分解せずに内部洗浄可能



アスピレーターの代りに



デシケーターに



吸引濾過に

## 真空度を高精度に制御する用途に



### インターフェースセット V-102

品番 11V100110

標準価格 ¥380,000 ▶

キャンペーン価格 **¥301,000**

内訳:

V-100本体	11V100000
インターフェースI-100	11I100002
ウルフびん	047170

- 電磁弁不要
- エバポレーターの真空源に最適！

## 真空度を高精度制御しつつ溶媒回収も行う用途に



### インターフェース溶媒回収セット V-103

品番 11V100111

標準価格 ¥500,000 ▶

キャンペーン価格 **¥390,000**

内訳:

V-100本体	11V100000
インターフェースI-100	11I100002
ウルフびん	047170
二次コンデンサーセット	047180

- ポンプ出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、逃げる溶媒を凝集させ回収
- 高精度の真空制御で安定した真空度を維持

Quality in your hands

## 日本ビュッヒ株式会社

本 社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F  
TEL : 03-3821-4777 FAX : 03-3821-4555  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F  
TEL : 06-6195-9241 FAX : 06-6195-9251

nihon@buchi.com | www.buchi.com/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2018年3月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。